


# VITAL SIGNS MONITOR

**SOTEIRA S41**

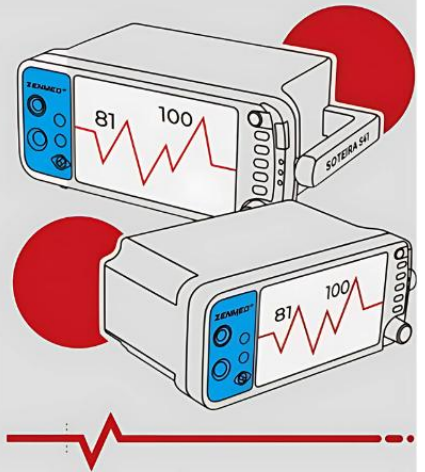

## Produsen

PT Zenith Allmart Precisindo

## KEMENKES RI

AKD 20502320540



Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia



08113066886



marketing@zenmed.co.id



zenmed.co.id

## 4 PARAMETER DALAM 1 ALAT



Tekanan Darah  
Non-Invasif



Saturasi  
Oksigen



Temperatur




EKG

## TENTANG PRODUK

Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk mengukur dan memantau tanda-tanda vital dalam tubuh manusia seperti detak jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, dan suhu tubuh.

Vital signs monitor yang dirancang untuk digunakan di laboratorium & rumah sakit atau area klinik yang memerlukan sistem pemantauan. Alat ini memberikan pengukuran yang cepat dan andal untuk pasien dewasa dan bayi baru lahir.

# SPEKIFIKASI PRODUK

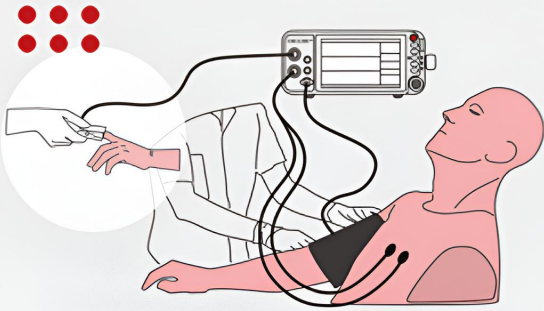


Mengumpulkan data penting pasien seperti EKG, oksimetri, tekanan darah non-invasif, suhu tubuh pasien dan ditampilkan pada layar LCD 7".



Tombol silikon dengan kelenturan tinggi, tidak beracun, tidak beres.



Dirancang tanpa kipas untuk menjaga tetap senyap ketika beroperasi

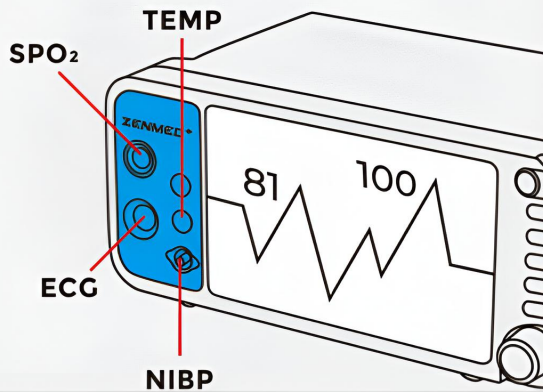

KOMPONEN	DESKRIPSI
Berat	2,05 Kg, termasuk 1 baterai
Dimensi	324mm x 183mm x 129cm
Layar	TFT LCD 7 inch, LED backlight putih, 800x480 piksel
Alarm	45 - 85 dBA
Volume Alarm	Penyimpanan Penuh, Baterai Lemah, Sensor Mati
Pengaturan Notifikasi	Suara dan Tampilan
Baterai	Lithium 4.400mAh, DC 11.1V
Tegangan	AC 100-240V, 50-60Hz, 80 VA
Pemakaian Baterai	2 - 3,5 Jam (bergantung pemakaian)
Suhu Lingkungan	-40 ~ 75 derajat Celcius (Dipindahkan & disimpan) 0 ~ 50 derajat Celcius (Kondisi dipakai)
Konfigurasi	Elektrokardiogram (EKG) Oksimetri (SpO2), Temperatur Suhu (TEMP), Tekanan Darah Non-Invasif (NIBP)

Dirancang dan Diproduksi oleh **ZENMED+**

## FITUR

### Elektrokardiogram (EKG)

Menyediakan pemrosesan EKG 5 sadapan terus menerus dan dapat menampilkan hingga 3 saluran dalam bentuk gelombang secara bersamaan.

### Oksimetri (SpO2)

Pemantauan saturasi oksigen non-invasif terus menerus pada laju arteri dan denyut nadi.

### Tekanan Darah Non-Invasif (NIBP)

Memberikan data detak jantung serta nilai tekanan arteri sistolik, diastolik dan rata-rata.

### Pemantauan Suhu Tubuh

Memantau suhu pasien dengan menyediakan 2 saluran kontrol suhu yang independen (T1 & T2)

### Tampilan yang Mendalam

Menampilkan gambar dan informasi secara real time dan terukur menggunakan bentang layar 7 inci serta kualitas LCD tajam dan jernih dengan resolusi 800 x 480 piksel.

### Baterai Isi Ulang & Kapasitas Besar

Kapasitas baterai isi ulang yang besar untuk jam kerja yang lebih lama dan pergantian baterai secara instan untuk waktu yang lebih singkat.

### 5 Mode Tampilan Layar

Menyediakan 5 pilihan layar dan tata letak berbeda yang bisa dipilih sesuai dengan gaya baca pengguna.

### Desain Ergonomis & Tahan Guncangan

Dirancang untuk tahan guncangan ketika dibawa ke berbagai lokasi yang diperlukan serta memiliki desain yang ringkas & nyaman digunakan.